

SimplyMED⁺

NÁVOD K POUŽITÍ

Název výrobku:
Elektrický ústní irigátor

Číslo modelu: **TH2D4**

Informace o výrobku

Název výrobku: Elektrický ústní irigátor
Model výrobku: TH2D4
Výrobce: Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
Adresa: No. 108 Zhixian Road, Xueshi Street of Yuelu District,
Changsha 410208, Hunan Province, P. R. China
VYROBENO V ČINĚ
Dovozce: Variopharma s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Historie revizi

Tento návod k použití má číslo revize. Toto číslo revize se mění vždy, když je v důsledku změny softwaru nebo technické specifikace provedena aktualizace návodu k použití.
Obsah tohoto návodu k použití se může změnit bez předchozího upozornění.

- Číslo revize: 1.2
- Čas vydání: 2022-7

Autorská práva Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Před použitím výrobku si dobře prostudujte tento návod k použití.

- ⚠ **VAROVÁNÍ**
Požadavky, jejichž nedodržení může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Zakázané činnosti a způsoby manipulace se zařízením.
- ⚠ **POZNÁMKA!**
Povinné úkony a pokyny, které je třeba důsledně dodržovat, aby byl zajištěn bezpečný provoz.

I. Poznámky


1. Nevkládejte žádné zařízení s „nespecifikovaným napětím“.
2. Nepřipojujte/ neodpojujte ke zdroji napájení/od zdroje napájení mokřima rukama.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je výrobek nebo napájecí kabel poškozený nebo pokud výrobek nefunguje.
4. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k čištění ústní dutiny.
5. Nestříkejte vodu do míst pod jazykem, ani do uší, nosu, očí nebo jiných citlivých částí těla; tlak vytvářený tímto výrobkem mohl tyto orgány poškodit.
6. Nestříkejte vodu na jiné osoby, zejména ne do očí, aby nedošlo k jejich poranění.
7. Při potížích se zuby používejte tento výrobek pod dohledem lékaře.
8. Pokud vám lékař před ošetřením zubů doporučí preventivní užívání antibiotik, poraďte se před použitím tohoto výrobku nebo jakýchkoli pomůcek pro ústní hygienu se svým lékařem.
9. Nepoužívejte tento výrobek tehdy, pokud máte v ústech nebo na jazyku otevřené rány.
10. Před použitím tohoto výrobku vyjměte z úst všechny pohyblivé vložky.
11. Děti od 3 let a osoby se zvláštními potřebami mohou používat tento výrobek pouze pod přísným dohledem a vedením.
12. Do nádrčky na vodu tohoto výrobku nepřidávejte jód, bělidlo ani ve vodě nerozpustný éterický olej, protože tyto látky snižují výkonnost výrobku a zkracují jeho životnost. Použití takových látek může vést ke ztrátě záruky.
13. Osoby, které nejsou autorizovaným technikem, nesmí tento výrobek rozebírat.
14. Nepoužívejte tento výrobek, pokud v nádrčce na vodu není voda. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
15. Tento výrobek by měl být skladován v suchém a čistém prostředí a musí být chráněn před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

16. Obalový sáček od tohoto výrobku řádně zlikvidujte, abyste zabránili nehodám, například udušení kojenců/děti. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí malých součástek kojenci/děti nebo aby děti přístroj nerozmontovaly.

II. Úvod k výrobku Určené použití/Návod k použití:

Toto zařízení je určeno k vytvoření tlakového proudu vody, který odstraňuje zbytky potravin z mezizubních prostor, což napomáhá ochraně zdraví dásní.

1. Zobrazení výrobku

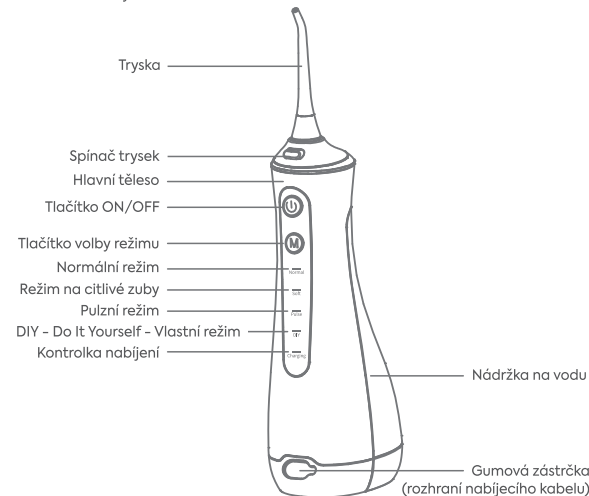

- ⚠ **POZNÁMKA:** v nádrži na vodu nebo v sacím potrubí se může nacházet kapalina, která je zbytkem destilované vody z kontroly ve výrobním závodě; tato kapalina nepředstavuje zdravotní ani bezpečnostní riziko.

2. Seznam součástí v balení výrobku
Ústní sprcha: 1 sada; tryska: 1 ks; nabíjecí kabel: 1ks; návod k použití: 1ks.

3. Ukazatele výkonnosti produktu
- Pracovní režim: Normální/jemný/pulsní/DIY
 - Jmenovitý tlak vody: 30-90PSI
 - Kapacita nádrčky na vodu: 200 ml
 - Parametry napájení: specifický příkon: 5V = 500mA
Vnitřní baterie: 3,7V = 1400mAh

- ⚠ **POZNÁMKA:** použijte lékařský napájecí adaptér, který splňuje požadavky pro nabíjení
- Provozní podmínky: Okolní teplota: 5°C-40°C; relativní vlhkost vzduchu: ≤90%; barometrický tlak: 70kpa-106kpa.
- Podmínky přepravy a skladování: Okolní teplota: -20°C-55°C; RH: ≤90 %; barometrický tlak: 70kpa-106kpa.

4. Vlastnosti a použití výrobku
- Vlastnosti:
 - ① Volba z více režimů;
 - ② Uživatelsky přátelské konstrukční řešení pro lidské tělo, snadné a pohodlné ovládání;
 - ③ Vyměnitelná tryska, kterou může používat více členů rodiny.
 - Použití: Určeno k výplachu ústní dutiny.
5. Specifikace
- Velikost výrobku: cca 211×69×86 mm (bez trysky)
 - Hmotnost: přibližně 290 g (bez trysky).

III. Návod k použití

1. Čištění: před prvním použitím výrobek vyčistěte.
 - ⚠ **POZNÁMKA:** tento výrobek má vodotěsné provedení IPX7, a proto jej lze mýt přímo pod kohoutkem; po umytí povrch výrobku osušte.
 - ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** nenamáčejte výrobek do vody.
 - ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** výrobek nemýjte vodou o teplotě >40 °C, aby nedošlo k vyblednutí, deformaci nebo popálení.

VAROVÁNÍ: po vyčištění výrobku čistícím prostředkem jej musíte otřít kusem suché látky a poté jej opláchněte pod čistou vodou, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

VAROVÁNÍ: k čištění výrobku nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol, aby nedošlo k prasknutí, vylodnutí nebo poruše součástí.

2. Nabíjení: před použitím výrobek plně nabijte. Chcete-li výrobek nabít, zapojte nabíjecí kabel do schváleného napájecího adaptéru a zapněte napájení. Během procesu nabíjení bude blikat kontrolka nabíjení. Nabíjení trvá přibližně 4 hodiny. Po úplném nabití výrobku zůstane kontrolka nabíjení svítit a můžete odpojit nabíjecí kabel.


POZNÁMKA: před nabíjením výrobku vyjměte gumovou zástrčku a rádně ji uschovejte.

POZNÁMKA: pokud se při provozu výrobku sníží napětí baterie, bude kontrolka nabíjení nepřetržitě blikat, což znamená, že je třeba výrobek nabít.

POZNÁMKA: během nabíjení výrobek nikdy nepoužívejte.

3. Nasadte/vyjměte trysku:


- Vložení trysky: stiskněte a podržte spínač trysky, zarovnejte trysku se středovým otvorem přenosné ústní sprchy a zasuňte ji do příslušné polohy a poté, když uslyšíte zvuk „cvaknutí“, spínač trysky uvolněte.
- Vyjmutí trysky: pokud potřebujete trysku vyjmout, stačí stisknout přepínač trysky.

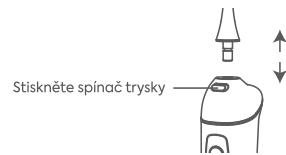

VAROVÁNÍ: nikdy nemačkejte spínač trysky, pokud je ústní sprcha zapnutá.

4. Doplňte vodu do nádrčky na vodu:

- Otevřete kryt nádrčky na vodu;
- Umístěte přívod vody pod hladinu vody;
- Po doplnění dostatečného množství vody zavřete nádrčku na vodu.

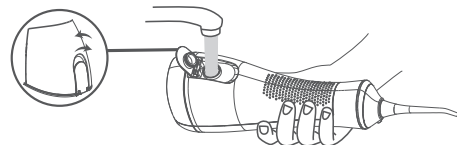

UPOZORNĚNÍ: do nádrčky na vodu nepřidávejte vodu o teplotě >40 °C, jinak se můžete popálit.

5. Zapnutí/vypnutí napájení: Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte pracovní stav.

6. Výběr režimu:

- Stisknutím tlačítka Mode Select (Výběr režimu) přepínáte mezi normálním režimem, jemným režimem, pulzním režimem a režimem DIY. Můžete začít jemným režimem a postupně zkoušet ostatní režimy tak, jak vám to bude vyhovovat.
- Tento výrobek má funkci zapamatování režimů. Po zapnutí výrobku automaticky přejde do zapamatovaného režimu.

7. Návod k provozu v režimu DIY

- Stisknutím tlačítka Mode (Režim) ještě před zapnutím přístroje zvolíte režim DIY, po zapnutí se rozsvítí kontrolka DIY.
- Podržte tlačítko Mode, když kontrolka LED DIY bliká, nastavte režim DIY.

8. Nastavení režimu DIY

- pracovní stav DIY stoupá od nejslabšího k nejsilnějšímu stupni, zůstane v něm asi 2 sekundy a pak se v opakovaném cyklu vrátí k nejslabšímu. Když zvolíte vhodný provozní stav DIY, stačí uvolnit tlačítko Mode a režim DIY je nastaven.
- Podržení tlačítka Mode se režimem DIY v opakovaném cyklu obnoví.
- Podržte tlačítko MODE bez uvolnění, přechod od nejslabšího stupně po nejsilnější stupeň trvá 10 s, zůstane v něm 2 sekundy a pak se v opakovaném cyklu vrátí na nejslabší. Zvuk motoru v režimu DIY se bude měnit podle stupňů DIY.

9. Postup a metoda výplachu ústní dutiny:

- Nakoňte se nad umyvadlo, vložte trysku do úst, namířte trysku na linii dásní a stiskněte tlačítko ON/OFF;
- Pokud možno vyplachujte postupně směrem od zadních zubů k předním; dosáhnete tím nejlepšího výsledku;
- Pohybuje tryskou podél linie dásní a chvíli setrvejte mezi zuby (tak, aby voda stříkala mezi zuby a rozstříkovala se na okraj mezi zubem a dásní). Tímto způsobem vyčistíte horní i dolní zuby.

POZNÁMKA: při používání tohoto výrobku nastavte proud vody pod úhlem 90 stupňů ke rtům – lehce, aby nedocházelo k rozstříkování vody, ale nechte mezeru, aby voda v ústech mohla volně stékat do umyvadla.

POZNÁMKA: pokud používáte tento přístroj poprvé, můžete zaznamenat lehké krvácení z dásní, ačkoli jsou vaše dásně zdravé. Problém s krvácením obvykle skončí po cca 1 až 2 týdnech, až se vaše dásně adaptují. Pokud vám dásně budou krváčet déle než dva týdny, je to známkou toho, že vaše dásně zřejmě nejsou v pořádku (například paradentóza). V takovém případě byste měli přestat tento přípravek používat a poradit se se zubním lékařem.

POZNÁMKA: nestříkejte vodu přímo do parodontální kapsy.

VAROVÁNÍ: nepříkládejte špičku trysky k zubům nebo dásním.

VAROVÁNÍ: jednu trysku by měla používat pouze jedna osoba.

UPOZORNĚNÍ: osoby s citlivými ústy by měly tento výrobek používat se zvýšenou opatrností.



10. Čištění po použití:

Po použití je třeba výrobek důkladně vyčistit, protože, pokud v něm zůstane voda, mohou se v ní množit bakterie.

- Otevřete kryt nádrčky na vodu a vodu vylijte;
- Nechte výrobek zapnutý, dokud z něj nevyteče všechna voda;
- Vypněte napájení.

UPOZORNĚNÍ: po použití vylijte vodu z nádrčky na vodu a zapněte výrobek, aby se voda vypustila. Pokud je výrobek používán v nehygienickém stavu, může dojít v důsledku množení plísní a bakterií a k následnému poškození vašeho zdraví. Navíc se může v přístroji vyvinout nepříjemný zápach nebo přístroj nebude fungovat dobře.

11. Údržba:

- Tryska: vyčistěte trysku vodou a poté ji osušte hadříkem. Doporučujeme trysku vždy každé 3 měsíce vyměnit. Pokud se špička trysky deformuje, brzy ji vyměňte. V opačném případě to může mít vliv na používání nebo to může dokonce vést k poruše přístroje.
- Nádrčka na vodu: Pokud bude přístroj delší dobu v nečinnosti, vysušte nádrčku na vodu.
- Kryt nádrčky na vodu: Včas otřete skvrny od vody, jinak se skvrny změní v nečistoty a mohou se zde množit bakterie. Pokud je vrstva nečistoty příliš silná, může dojít k úniku vody.
- Baterie: před delší dobou nečinnosti by měla být baterie plně nabitá; následně by se měla vždy jednou za dva měsíce nabít.

IV. Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Výrobek nefunguje.	Výrobek je nově zakoupený nebo byl déle než 3 měsíce v nečinnosti.	Výrobek plně nabijte a poté jej zapněte. Pokud výrobek stále nefunguje, pravděpodobně došlo k jeho poškození. Obráťte se na výrobce nebo prodejce.
Výrobek funguje pouze po dobu několika minut.	Výrobek není plně nabitý a napětí baterie zůstává nízké nebo baterie dosáhla konce svého životního cyklu.	Průběžně výrobek nabíjejte, vždy naplno, a poté jej zapněte. Pokud tato závada přetrvává, obraťte se na výrobce nebo prodejce. pravděpodobně došlo k jeho poškození. Obráťte se na výrobce nebo prodejce.

Tlak vody je nízký	Tryska je zablokována nečistotou nebo je zdeformovaná.	Vyměňte trysku
Z nádrčky nestříká žádná voda	1. Žádná voda v nádržce. 2. Výrobek se používá v extrémně nakloněném stavu. 3. V čerpadle je velké množství nečistot.	1. Do nádrže na vodu nalijte dostatečné množství vody. 2. Použijte výrobek ve vertikální poloze 3. Obráťte se na výrobce nebo prodejce.

V. Likvidace

Před likvidací tohoto výrobku vyjměte baterii. Při vyjmutí baterie postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Vypněte výrobek;
2. Vyjměte nádrčku na vodu a vyjměte šrouby ve spodní a horní části výrobku, abyste výrobek rozebrali;
3. Odřízněte kladný a záporný pól baterie;
4. Vyjměte baterii.

UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nelze vyjmout, zašlete přenosnou ústní sprchu výrobci, servisnímu středisku nebo prodejci, který vám pomůže baterii vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními předpisy. Vzhledem k tomu, že tento výrobek obsahuje elektronické součástky, nelikvidujte jej společně s běžným domovním odpadem, ale zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy.